




Polyvalent
Assise droite
Écartement des
jambes

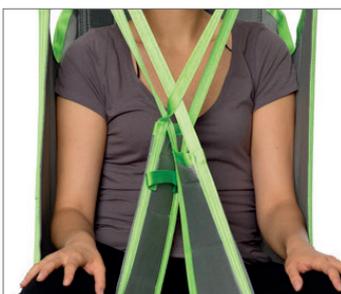

Le harnais d'assise est un modèle à hauteur d'épaule avec des parties de jambes divisées et renforcées ainsi qu'un dos renforcé. Il est conçu pour apporter un soutien supplémentaire au patient et constitue une bonne solution pour les utilisateurs dont le tronc est peu stable.

Polyvalent

Le harnais d'assise est composé d'un tissu polyester qui rend son application rapide et simple. La facilité d'application de ce harnais permet de l'utiliser dans la plupart des situations de levage. La conception du harnais permet une assise droite qui assure un bon positionnement lorsque le patient est installé dans un fauteuil.

Soutien supplémentaire

Le harnais d'assise est doté d'un dossier et de sections pour les jambes renforcées permettant de renforcer le soutien de la zone dorsale pour les utilisateurs dont le tronc est peu stable. Le harnais d'assise est utilisable avec ou sans une ceinture optionnelle

disponible dans un assortiment de tailles avec une fermeture à Velcro ou à boucle.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.

HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Téléphone: +46 8 665 35 00
Télec. : +46 8 665 35 10
Courriel : info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Téléphone : +613.723.6734
Fax : +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Téléphone : +31 577 412 171
Fax : +31 577 412 170
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78744
Téléphone : +512.476.7199
Fax : +512.476.7190
Courriel : info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties No de pièce 21180-*



Ceinture

Fermeture par velcro ou boucle.
Disponible en taille junior et adulte.
Velcro No de pièce 25145-**
Boucle No de pièce 25146-***

Modèle 25146 illustré



Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension.
No de pièce 50866



Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

Réf. no. 57551, 55764 [2 or 3-Point - dégageement rapide], 55619 [4 points - fixation au crochet de pied]

Levage



Utilisation vers/depuis un lit


Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utiliser vers/depuis une chaise


Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.

Soins et caractéristiques

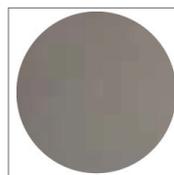

Polyester

Durable, à faible frottement, facile à nettoyer, à appliquer et à retirer.

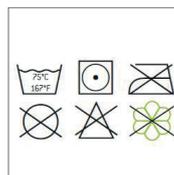

Entretien


Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



Testé selon toutes les normes pertinentes, y compris la norme ISO 10535, palans pour le transfert de personnes handicapées.

Spécifications techniques

Numéro de pièce	Taille	Couleur	A	B	C
25030-JS	Junior Small		22 cm / 8,7 po	56 cm / 22 po	53 cm / 22,9 po
25030-JM	Junior Medium		28 cm / 11 po	63 cm / 24,8 po	58 cm / 22,8 po
25030-S	Small		35 cm / 13,8 po	76 cm / 29,9 po	62 cm / 24,4 po
25030-M	Medium		40 cm / 15,7 po	86 cm / 33,9 po	62 cm / 24,4 po
25030-L	Large		44 cm / 17,3 po	98 cm / 38,6 po	63 cm / 24,8 po
25030-XL	Extra Large		48 cm / 18,9 po	102 cm / 40,2 po	64 cm / 25,2 po
Poids maximum de l'utilisateur	300 kg/660 lb				

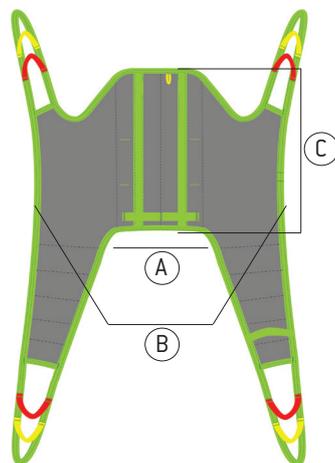

* Disponible en plusieurs longueurs : 10 cm/3,9 po [21180-10], 15 cm/5,9 po [21180-15], 20 cm/7,8 po [21180-20], 25 cm/9,8 po [21180-25], 35 cm/13,7 po [21180-35]

** Tailles Junior : 40 cm/15,7 po [25145-40B], 50 cm/19,7 po [25145-50B], 60 cm/23,6 po [25145-60B]; Tailles Adultes : 60 cm/23,6 po/[25145-60], 70 cm/27,6 po [25145-70], 80 cm/31,5 po [25145-80], 90 cm/35,4 po [25145-90], 110 cm/43,3 po [25145-110], 120 cm/47,3 po [25145-120]

*** Tailles Junior : 40 cm/15,7 po [25146-40B], 50 cm/19,7 po [25146-50B], 60 cm/23,6 po [25146-60B]; Tailles Adultes : 60 cm/23,6 po/[25146-60], 70 cm/27,6 po [25146-70], 80 cm/31,5 po [25146-80], 90 cm/35,4 po [25146-90], 100 cm/39,4 po [25146-100], 110 cm/43,3 po [25146-110], 120 cm/47,3 po [25146-120]