

# Bath Sling



Séchage rapide  
Dos renforcé  
Écartement des  
jambes



Le Bath Sling Human Care peut être utilisé dans la plupart des situations de levage et convient à la plupart des patients, mais il est plus adapté aux environnements humides. Le tissu en filet polyester sèche rapidement après utilisation, ce qui le rend idéal pour les bains, les douches et la rééducation dans les piscines. Le harnais de bain est conçu pour apporter un soutien supplémentaire au patient et constitue une bonne solution pour les utilisateurs dont le tronc est peu stable.

#### Matériau à séchage rapide

Le harnais de bain est fabriqué dans un tissu en filet de polyester, une matière souple et fine qui respire et sèche rapidement. C'est le choix idéal pour les bains et les douches, mais il peut également être utilisé dans les piscines de rééducation. La conception harnais crée une assise verticale qui assure un positionnement correct lorsque le patient est placé dans une chaise de bain. Grâce à son élasticité, le matériau peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.

#### Soutien supplémentaire

Le harnais de bain est doté d'un dos et de jambes renforcés qui offrent un soutien supplémentaire dans toute la zone du dos pour les utilisateurs dont

le tronc n'est pas stable. Le harnais de bain peut être utilisé avec ou sans une ceinture optionnelle disponible dans un assortiment de tailles avec une fermeture à Velcro ou à boucle.

#### Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.



## Accessoires



### Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties No de pièce 21180.\*



### Rembourrage et supports de jambe

Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs. No de pièce : 21146-S, M, L Supports renforcés. Taille unique. No de pièce 25102

Modèle 21146 Modèle 25102



### Ceinture

Fermeture par velcro ou boucle. Disponible en taille junior et adulte. Velcro No de pièce 25145-\*\* Boucle No de pièce 25146-\*\*\*

Modèle 25146 illustré



### Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

No de pièce 57551, 55764 [2 ou 3 points], 55619 [4 points - se fixe sur le crochet de la jambe]

## Levage



### Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



### Utiliser vers/depuis une chaise


Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



### Utiliser pour la douche


Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.

## Soins et caractéristiques

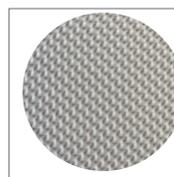


### Filet Polyest

Matière douce et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour le bain ou la douche.

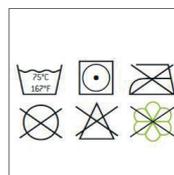

### Entretien


Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.

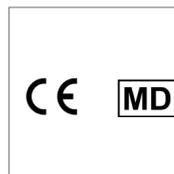

Testé selon toutes les normes pertinentes, y compris la norme ISO 10535, palans pour le transfert de personnes handicapées.

## Spécifications techniques

Numéro de pièce	Taille	Couleur	A	B	C
25035-JS	Junior Small		22 cm / 8,7 po	56 cm / 22 po	53 cm / 22,9 po
25035-JM	Junior Medium		28 cm / 11 po	63 cm / 24,8 po	58 cm / 22,8 po
25035-S	Small		35 cm / 13,8 po	76 cm / 29,9 po	62 cm / 24,4 po
25035-M	Medium		40 cm / 15,7 po	86 cm / 33,9 po	62 cm / 24,4 po
25035-L	Large		44 cm / 17,3 po	98 cm / 38,6 po	63 cm / 24,8 po
25035-XL	Extra Large		48 cm / 18,9 po	102 cm / 40,2 po	64 cm / 25,2 po
Poids maximum de l'utilisateur	300 kg / 661 lb				

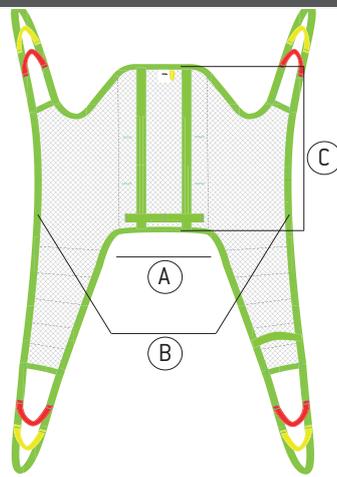

\* Disponible en plusieurs longueurs : 10 cm/3,9 po [21180-10], 15 cm/5,9 po [21180-15], 20 cm/7,8 po [21180-20], 25 cm/9,8 po [21180-25], 35 cm/13,7 po [21180-35]

\*\* Tailles Junior : 40 cm/15,7 po [25145-40B], 50 cm/19,7 po [25145-50B], 60 cm/23,6 po [25145-60B]; Tailles Adultes : 60 cm/23,6 po [25145-60], 70 cm/27,6 po [25145-70], 80 cm/31,5 po [25145-80], 90 cm/35,4 po [25145-90], 110 cm/43,3 po [25145-110], 120 cm/47,3 po [25145-120]

\*\*\* Tailles Junior : 40 cm/15,7 po [25146-40B], 50 cm/19,7 po [25146-50B], 60 cm/23,6 po [25146-60B]; Tailles Adultes : 60 cm/23,6 po [25146-60], 70 cm/27,6 po [25146-70], 80 cm/31,5 po [25146-80], 90 cm/35,4 po [25146-90], 100 cm/39,4 po [25146-100], 110 cm/43,3 po [25146-110], 120 cm/47,3 po [25146-120]



*Nous améliorons la liberté de mouvement et la qualité des soins pour les patients*

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)