



Soutien optimal
Sécurité
Deux matériaux



High Basic Sling

Notre harnais Basic haut est un harnais confortable et une solution idéale pour les patients dont la stabilité du haut du corps est faible. Sa conception est similaire à celle du harnais Basic, à l'exception du fait qu'il soutient la tête et le cou pendant les transferts.



Soutien renforcé

Le harnais Basic haut est parfait pour les patients qui ont besoin d'un soutien important et qui ont un tonus bas ou élevé. Il permet de sécuriser les opérations de transfert, tant pour le soignant que pour le patient, et convient parfaitement pour soulever les patients depuis et vers le sol. Afin d'assurer un soutien optimal de la tête et du cou, le harnais est équipé de deux renforts amovibles.

est souple, aéré et sèche rapidement, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les environnements de baignade. Ils peuvent être utilisés avec une suspension à 2, 3 ou 4 points selon les besoins.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.



Deux tissus

Le harnais High Basic est un harnais confortable disponible en deux tissus : polyester et filet polyester. Les matériaux du Polyester Net permettent un transfert efficace de l'humidité et de la chaleur du patient, ce qui permet de laisser le harnais derrière le patient pendant une courte période après la fin du transfert. Le tissu Polyester Net



Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



Rembourrage et supports de jambe

Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs. No de pièce : 21146-S, M, L Supports renforcés. Taille unique. No de pièce 25102



Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide. No de pièce 50866



Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

Réf. no. 57551, 55764 (2 or 3-Point - dégagement rapide), 55619 (4 points - fixation au crochet de pied)

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.




Utilisation vers/depuis un fauteuil

Convient pour les transferts et les repositionnements vers/ depuis un fauteuil. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utilisation vers/depuis le sol

Adapté aux transferts depuis le sol.

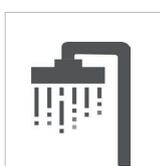

Utiliser pour la douche


Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.

Soins et caractéristiques




Filet en polyester

Matériau doux et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour prendre un bain ou une douche.

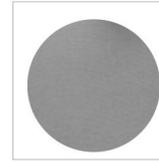

Polyester

Matériau durable avec un faible coefficient de frottement, ce qui le rend facile à appliquer et à nettoyer. Équipé de poignées.

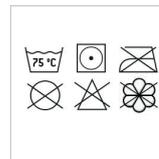


Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utilisez un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.

Spécifications techniques

Numéro d'article		Taille	Couleur	A	B	C
Filet en polyester	Polyester					
25037-JS	25032-JS	Junior Small	JS	22 cm / 8,7 po	62 cm / 24,4 po	67 cm / 26,4 po
25037-JM	25032-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11 po	65 cm / 25,6 po	74 cm / 29,1"
25037-S	25032-S	Small	S	35 cm / 13,8 po	77 cm / 30,3 po	86 cm / 33,8 po
25037-M	25032-M	Medium	M	40 cm / 15,7 po	88 cm / 34,6 po	91 cm / 35,8 po
25037-L	25032-L	Large	L	44 cm / 17,3 po	98 cm / 38,6 po	100 cm / 39,4 po
25037-XL	25032-XL	Extra Large	XL	48 cm / 18,9 po	102 cm / 40,1 po	102 cm / 40,1 po
25037-XXL	25032-XXL	Extra Extra Large	XXL	52 cm / 20,5 po	108 cm / 42,5 po	107 cm / 42,1 po
Poids maximal de l'utilisateur : 300 kg / 660 lb						

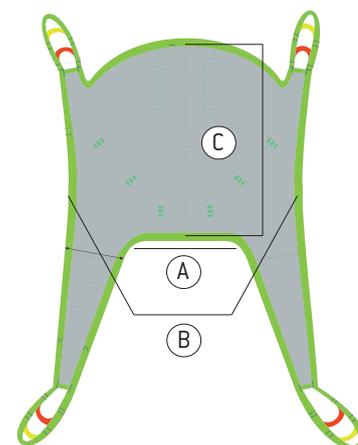

* Disponible en longueurs assorties : 10 cm/3,9 po (21180-10), 15 cm/5,9 po (21180-15), 20 cm/7,8 po (21180-20), 25 cm/9,8 po (21180-25), 35 cm/13,7 po (21180-35)



Nous améliorons la liberté de mouvement et la qualité des soins aux personnes.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)
 Årstaängsvägen 21B
 117 43 Stockholm
 +46 8 665 35 00
humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
 10-155 Colonnade Road
 ON K2E 7K1 Ottawa
 +1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS
 Elspeterweg 124
 8076 PA Vierhouten
 +31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS
 8006 Cameron rd, Suite K
 TX 78754 Austin, États-Unis
 +1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com