

E-Clips de sécurité
(pinces)

Soutien ergonomique

Assise confortable



Soutien en position debout

En aidant un patient à se lever, les soignants doivent souvent veiller à la sécurité et à l'ergonomie pour les deux parties concernées. Notre E-Clip pour ceinture dorsale leur apporte le soutien dont ils peuvent avoir besoin pour utiliser correctement l'élévateur assis-debout Sebastian II.



La ceinture dorsale encourage les mouvements naturels, le dos rembourré offrant un soutien dorsal confortable pendant que l'on se lève. La ceinture dorsale permet également au patient de se sentir en sécurité et prévient tout risque de chute en arrière. La ceinture intégrée avec fermeture à boucle maintient le harnais en place pendant toute la durée du transfert. La surface antidérapante à l'intérieur du dossier empêche le harnais de glisser vers le haut lorsque le patient se lève, ce qui permet au patient et au soignant de se concentrer entièrement sur la station debout. Pour les patients dont la stabilité du tronc est limitée ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des difficultés à se lever, la pince en E de la ceinture dorsale est un complément bienvenu lors de l'utilisation d'un verticalisateur.

L'E-Clip Universel est un système éprouvé de fixation d'un harnais à un élévateur, réduisant ainsi considérablement le risque d'erreur. Le clip est placé autour des mousquetons du cintre/de la barre d'écartement et se ferme avec un « clic » audible. Il signale à la personne qui s'occupe de l'enfant que le clip est bien fixé et qu'il ne peut pas se déconnecter inopinément.

Nos harnais sont faciles à mettre en place, à nettoyer et à entretenir. Ils sont dotés d'un code couleur qui vous permet de trouver rapidement et facilement la bonne taille. Les harnais Human Care sont produits selon les normes de qualité les plus strictes. Le harnais est renforcé par une sangle verte très résistante, ce qui lui confère une excellente solidité et une grande longévité.



Usage



De et vers le lit

Convient pour soulever les clients du lit et les aider à s'asseoir sur le lit.



De et vers une chaise

Convient pour le positionnement dans un fauteuil et pour les transferts vers et depuis un fauteuil.



Exercices debout

Convient aux exercices en position debout et aux exercices de rééducation.



Utilisation aux toilettes

Fournit un soutien supplémentaire lorsque vous utilisez les toilettes.

Caractéristiques




Polyester

Matériau durable avec un faible coefficient de frottement, ce qui le rend facile à appliquer et à nettoyer.



Verrouillage intégré e-clip

Peut être utilisé d'une seule main. Universellement compatible avec tous les élévateurs équipés d'attaches champignon Ø 6,8-8,2 mm. Ø 6,8-8,2 mm.

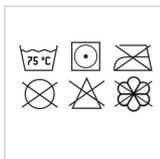


Instructions de nettoyage et d'entretien

Pour les instructions de nettoyage et d'entretien, consultez l'étiquette. Laver dans un sac à lessive agréé.



Spécifications techniques

Noms de produits	Numéro d'article	Taille	Couleur	A	B	C
E-clip pour ceinture dorsale S	25130C-S	Small		69 cm / 27,2 po	27 cm / 10,6 po	33 cm / 13 po
E-clip pour ceinture dorsale M	25130C-M	Medium		83 cm / 32,7 po	30 cm / 11,8	39 cm / 15,3 po
E-clip pour ceinture dorsale L	25130C-L	Large		92 cm / 36,2 po	34 cm / 13,4 po	44 cm / 17,3 po
E-clip pour ceinture dorsale XL	25130C-XL	Extra Large		103 cm / 40,5 po	39 cm / 15,3 po	50 cm / 19,7 po
	Poids maximum de l'utilisateur	250 kg / 551lb				

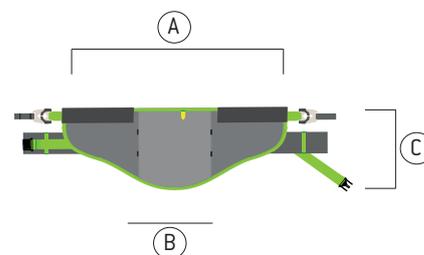

Nous améliorons la liberté de mouvement et la qualité des soins pour les patients

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE ALLEMAGNE

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzénau
+49 (0) 6023 994 936 8
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin, États-Unis
+1 5 124 76 7199
Courriel : info.us@humancaregroup.com