


# Toileting Sling & Toileting Sling High



Bras rembourrés  
Dos renforcé  
Écartement des  
jambes



No d'article 25080B, Harnais de toilette Ceinture

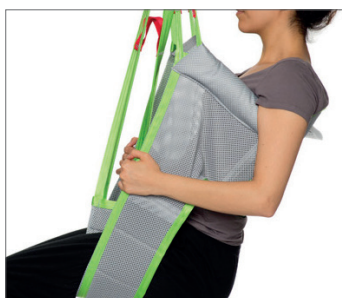

No d'article 25085, Harnais de toilette Net



No d'article 25090, Harnais de toilette Haut Filet

Nos Toileting Slings sont dotés d'une large cloison divisée au niveau des jambes qui permet une application simple et rapide pour l'habillage et le déshabillage pendant la toilette ou le bain. Ils conviennent aux patients dont le tronc est peu stable et sont dotés d'un rembourrage sous les bras pour plus de confort. Ils sont disponibles avec ou sans support de tête supplémentaire.

## Trois options

Ces harnais de toilette sont disponibles en deux modèles à dossier bas et un modèle à dossier haut avec un support de cou réglable pour une meilleure stabilité de la tête. La large séparation des parties de la jambe rend la mise en place du harnais simple et rapide et permet l'habillage et le déshabillage lors de la toilette ou du bain. Tous les modèles peuvent être utilisés avec ou sans une ceinture optionnelle disponible dans un assortiment de tailles avec une fermeture à Velcro ou à boucle.

## Positionnement optimal

Les modèles à dossier bas se caractérisent par une position assise droite qui facilite le transfert vers et depuis les toilettes. Le modèle à haut dossier présente une position inclinée (vers l'arrière) qui empêche

l'utilisateur de glisser hors du harnais et qui est particulièrement bénéfique pour les utilisateurs hypertoniques qui ont tendance à se surmener (performance spastique) ou pour les utilisateurs hypotoniques qui ont moins de contrôle sur leur corps.

## Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.



## Accessoires



### Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties No de pièce 21180-\*



### Ceinture

Fermeture par velcro ou boucle.  
Disponible en taille junior et adulte.  
Velcro No de pièce 25145-\*\*  
Boucle No de pièce 25146-\*\*\*



### Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide.  
No de pièce 50866



### Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

Réf. no. 57551, 55764 [2 or 3-Point - dégagement rapide], 55619 [4 points - fixation au crochet de pied]

## Levage



### Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



### Utiliser vers/depuis une chaise

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



### Utiliser pour la douche


Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.



### Utilisation pour les toilettes


Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.

## Soins et caractéristiques

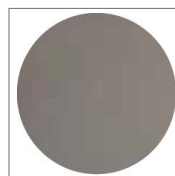


### Polyester

Durable, à faible frottement, facile à nettoyer, à appliquer et à retirer.

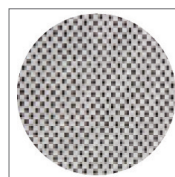

### Filet Polyest

Matière douce et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour le bain ou la douche.

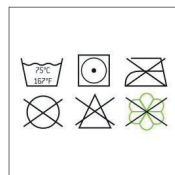

### Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette.  
Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



## Spécifications techniques

Numéro d'article	Taille	Couleur	Modèle no 25080/25085			Modèle no 25090			Modèle no 25080/25085	Modèle no 25090
			A	B	C	A	B	C		
Harnais de toilette Filet / Harnais de toilette Haut Filet	Harnais de toilette en polyester	Harnais de toilette avec ceinture								
-	25080-JS	25080B-JS	Junior Small	JS	28 cm / 11 po	62 cm / 24,4 po	22 cm / 8,7 po	-	-	-
25085-JM / 25090-JM	25080-JM	25080B-JM / 25090B-JM	Junior / Medium	JM	28 cm / 11 po	67 cm / 26,3 po	26 cm / 10,2 po	28 cm / 11 po	73 cm / 28,7 po	70 cm / 27,6 po
25085-S / 25090-S	25080-S	25080B-S / 25090B-S	Small	S	32 cm / 12,6 po	74 cm / 29,1 po	30 cm / 11,8 po	32 cm / 12,6 po	82 cm / 32,3 po	74 cm / 29,1 po
25085-M / 25090-M	25080-M	25080B-M / 25090B-M	Medium	M	48 cm / 18,9 po	90 cm / 35,4 po	33 cm / 13 po	48 cm / 18,9 po	92 cm / 36,2 po	83 cm / 32,7 po
25085-L / 25090-L	25080-L	25080B-L / 25090B-L	Large	L	49 cm / 19,3 po	97 cm / 38,2 po	33 cm / 13 po	49 cm / 19,3 po	99 cm / 39 po	90 cm / 35,4 po
25085-XL / 25090-XL	25080-XL	25080B-XL / 25090B-XL	Extra Large	XL	56 cm / 22 po	100 cm / 39,4 po	38 cm / 15 po	56 cm / 22 po	100 cm / 39,4 po	100 cm / 39,4 po
Poids maximum de l'utilisateur : 300 kg / 660 lb										

\* Disponible en plusieurs longueurs : 10 cm/3,9 po [21180-10], 15 cm/5,9 po [21180-15], 20 cm/7,8 po [21180-20], 25 cm/9,8 po [21180-25], 35 cm/13,7 po [21180-35]

\*\* Tailles Junior : 40 cm/15,7 po [25145-40B], 50 cm/19,7 po [25145-50B], 60 cm/23,6 po [25145-60B]; Tailles Adultes : 60 cm/23,6 po [25145-60], 70 cm/27,6 po [25145-70], 80 cm/31,5 po [25145-80], 90 cm/35,4 po [25145-90], 110 cm/43,3 po [25145-110], 120 cm/47,3 po [25145-120]

\*\*\* Tailles Junior : 40 cm/15,7 po [25146-40B], 50 cm/19,7 po [25146-50B], 60 cm/23,6 po [25146-60B]; Tailles Adultes : 60 cm/23,6 po [25146-60], 70 cm/27,6 po [25146-70], 80 cm/31,5 po [25146-80], 90 cm/35,4 po [25146-90], 100 cm/39,4 po [25146-100], 110 cm/43,3 po [25146-110], 120 cm/47,3 po [25146-120]



Nous améliorons la liberté de mouvement et la qualité des soins aux personnes.

www.humancaregroup.com

### HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
humancaregroup.com

### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

### HUMAN CARE PAYS-BAS

Elsperweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

### HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin, États-Unis  
+1 5 124 76 7199  
Courriel : info.us@humancaregroup.com