




Pro-skin  
Positionnement  
doux



La conception unique de la sangle de positionnement Pro Skin intègre un matériau DermaTherapy qui réduit le risque d'escarres chez les clients. La sangle est munie de bandes élastiques à chaque coin afin de mieux s'adapter au lit du client. Les huit boucles ont chacune trois boucles intégrées de couleurs différentes pour des niveaux individuels de hauteur de levage en fonction des besoins des clients.

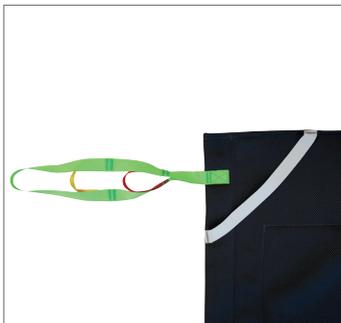

#### Harnais de positionnement Human Care

Human Care propose des dispositifs de positionnement conçus pour aider le personnel soignant à manipuler les patients en toute sécurité lors des opérations de positionnement/repositionnement, de retournement et de transfert pour un patient en position couchée.

permet à l'humidité et à la chaleur de se dissiper efficacement du client, ce qui permet de laisser le harnais derrière le patient pendant un certain temps une fois le transfert terminé. Le matériau DermaTherapy® qui est incorporé dans cette écharpe de positionnement crée une expérience plus propre, plus sèche et hypoallergénique. Le matériau DermaTherapy réduit efficacement le risque d'escarres.



Associé à une potence à deux points d'accrochage, il permet aux soignants de repositionner un patient dans son lit, sur le côté ou de haut en bas. Utilisé avec une barre de suspension à 4 points, le harnais peut également faciliter les transferts dans des situations telles que « du lit au lit », « du sol au lit » et « du lit à une position assise sur une chaise ».

#### Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Le harnais de positionnement Pro Skin est doté de huit boucles renforcées (6 pour le corps et 2 pour la tête) et d'une sangle en nylon haute résistance autour du harnais pour le rendre suffisamment solide afin de permettre un positionnement sûr des clients actifs.

#### Harnais de positionnement Pro Skin - Matériau de haute qualité

Le matériau Soft Air Mesh du Pro Skin Sling



Dispositifs d'aide  
à la marche



Lits de soins de santé



Solutions de levage




Hygiène



Chaises  
transformables

## Accessoires

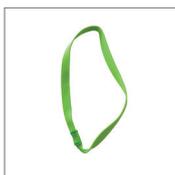

### Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



### Barre de suspension pour suspension à 4 points

4-Point - pour HeliQ ou HeliQ PT Numéro d'article 92938



### Barre de suspension pour suspension à 4 points

4 points - Fixation au crochet de jambe sur Altair/Roomer S Numéro d'article 55619

## Levage



### Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant un certain temps.



### Utiliser vers/depuis une chaise

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



### Modèle à usage unique


Jeter après utilisation. Destiné à une utilisation à court terme par un seul patient.



### Utilisation vers/depuis le sol

Adapté aux transferts depuis le sol.

## Soins et caractéristiques

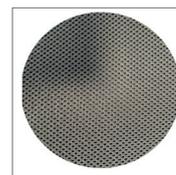

### Maille aérée douce

#### [Soft Air Mesh]

Matériau léger, frais et respirant. Convient aux peaux sensibles.



## Spécifications techniques

Numéro de pièce	Capacité de poids	A	B
NSB-451-DT	385 kg/850 lb	109 cm / 42,9 po	218 cm / 85,8 po

Tête de lit

The diagram shows a rectangular head of the bed with four lifting straps on each side. Dimension A is indicated at the bottom, and dimension B is indicated on the right side.

#### HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Téléphone: +46 8 665 35 00  
Télec.: +46 8 665 35 10  
Courriel: [info.se@humancaregroup.com](mailto:info.se@humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78744  
Téléphone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
Courriel: [info.us@humancaregroup.com](mailto:info.us@humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Téléphone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
[info.ca@humancaregroup.com](mailto:info.ca@humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Téléphone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
Courriel: [info.nl@humancaregroup.com](mailto:info.nl@humancaregroup.com)